


ResMed Ultra Mirage II Nasenmaske

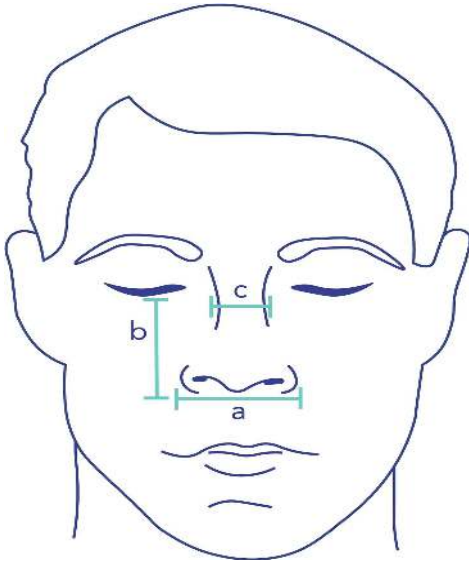

Größe/Linie	a [in cm]	b [in cm]	c [in cm]
Standard	$\leq 4,2$	$\leq 4,6$	$\leq 1,4$
Large	$\leq 4,4$	≤ 5	$\leq 1,6$
Shallow	≤ 5	$\leq 4,3$	≤ 2
Shallow-Wide	$\leq 5,3$	$\leq 4,3$	$\leq 2,4$

Erklärung:

Gesichtsmuskeln können sich beim Liegen verändern und während des Schlafens noch weiter entspannen. Zur Bestimmung der idealen Maskengröße sollten Sie daher versuchen, die Abmessungen in Ihrer persönlichen Schlafposition vorzunehmen. In dieser Position können Sie mit einem kleinen Kosmetikspiegel und einem handelsüblichen Lineal Ihre Maße erfassen.

Hierzu legen Sie das Lineal entsprechend den Linien in der Abbildung an und notieren die abgelesenen Werte. Wichtig ist, dass das Maskenkissen über beide Nasenlöcher reicht und die gesamte Nase umschließt. Hierbei darf die Maske nicht die natürliche Nasenatmung beeinträchtigen.

Die Maskenkissen der Ultra Mirage richten sich nach besonderen Gesichtszügen. Die Standard-Variante ist für jeden normalen Nasentyp geeignet. Haben Sie eine schmale und längere Nase, verwenden Sie Größe Large. Sollten Sie dagegen eine sehr kurze aber besonders breite Nase haben (Nasenrücken größer als 2cm) verwenden Sie je nach Abmessungen die Größe Shallow oder Shallow Wide.

Um mögliche Leckagen zu vermeiden, kann anschließend der Sitz der Maske über die Maskenbänder zusätzlich reguliert werden.

Sollten bei angemessener Maskenkissengröße und Einstellung des Kopfbandes dennoch Leckagen auftreten, könnte eventuell eine andere Maske oder Maskenart erforderlich sein.

Hinweis:

- Beachten Sie bitte, dass es sich um standardisierte Werte handelt und die Gesichtsformen der Anwender variieren. Der Größenberater soll lediglich als eine Orientierungshilfe fungieren.